


Attends® Soft




Attends - De oplossing voor iedere vorm van incontinentie

Attends Soft zijn uiterst comfortabele en zachte inleggers geschikt voor lichte tot zware urine incontinentie

Soft 0-3+

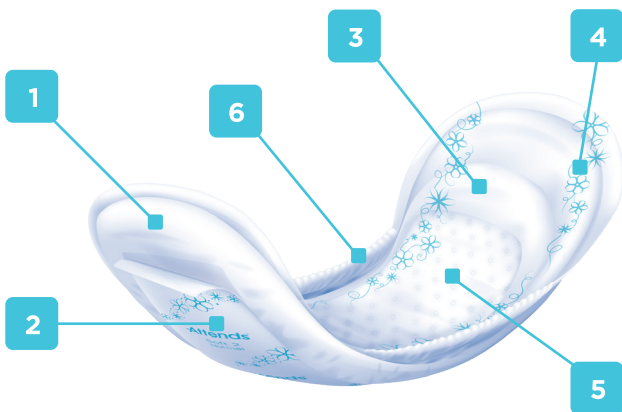

Soft 4-7

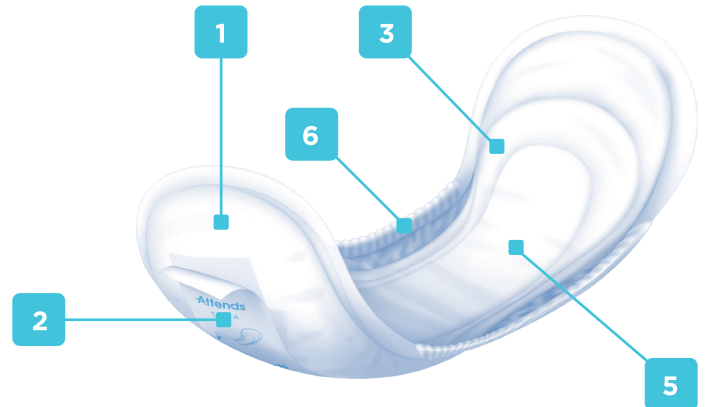

1 Een witte en luchtdoorlatende buitenlaag zorgt voor maximale discretie en het behoud van een gezonde huid.

2 Vanwege de fixatiestrook eenvoudig en discreet te bevestigen in het eigen, goed aansluitend ondergoed.

3 Anatomisch gevormde inlegger voor een comfortabele en veilig aansluitende pasvorm.

4 Zijdezachte, bedrukte bovenlaag (Soft 0-3+).

5 Een Superabsorberende dubbele kern (de zg. Actieve Zone) zorgt voor maximale veiligheid tegen doorlekken, het behoud van een comfortabel droge huid en Natuurlijke Geurbescherming.

6 Zachte elastische randjes (Soft 2 - 7) zorgen voor een komvormige pasvorm, voor extra discretie en bescherming tegen lekkage.



Attends Soft is getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be

	Verpakkingsinhoud Doosinhoud	Artikel Nr. Zak / Doos	Lengte (cm) Breedte kruis (cm)	Materiaal buitenlaag	Materiaal absorptiekern	Materiaal bovenlaag	Elastiek	Fixatie tape	Natuurlijke Geurbescherming	Ademend	Quick-Dry Technologie
Attends Soft Micro 0	28 8	205266 205273	17.5 6	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	2 lagen absorptiekern van vezels, Superabsorberende Polymeer korrels en synthetische vezels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Ultra Mini 0	28 8	205068 205075	20.5 6.5	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	2 lagen absorptiekern van vezels, Superabsorberende Polymeer korrels en synthetische vezels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Mini 1	20 12	204542 205327	21.5 8	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Mini Long 1	16 12	204566 204863	27.5 8	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Normal 2	12 8	207239 207246	26.5 10.5	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Extra 3	10 8	207253 207260	32.5 12	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Extra Plus 3+	10 12	204665 205112	36.5 13	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Maxi 4	8 12	204702 204894	38.5 14.5	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Super 4	46 3	204740 207673	38.5 14.5	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Maxi Plus 5	12 8	206485 206706	47.5 16.5	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 5	38 4	204764 204771	47.5 16.5	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 6	38 4	204788 204795	47.5 16.5	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 7	34 4	204801 204818	47.5 16.5	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non- woven	✓	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Quick-Dry is de aquisitielaag en bevindt zich direct onder de zachte bovenlaag. Deze laag absorbeert de urine snel en zorgt ervoor dat het vocht niet meer in aanraking komt met de huid. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en wordt het risico op lekkage aanzienlijk verminderd. De vezels hebben de capaciteit meerdere scheuten urine met dezelfde efficiëntie te verwerken.



Ademend

Luchtdoorlatende buitenlaag. Deze voelt zacht en comfortabel aan en zorgt er ook voor dat de huid kan blijven ademen. Dit zorgt voor een goede conditie van de huid.



Natuurlijke Geurbescherming

De absorptiekorrels in de kern zetten vocht om in een gelachtige massa. Dit heeft een neutraliserende werking en vermindert de kans op onaangename geurtjes.



Actieve Zone

De Actieve Zone bevindt zich in de kern van het product en garandeert een hoge absorptiecapaciteit daar waar het daadwerkelijk nodig is. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en zorgt voor extra veiligheid tegen doorlekken.



Per stuk verpakt

Dit bevordert de hygiëne en het product kan eenvoudig en discreet meegenomen worden als u niet thuis bent.



Zijdezachte toplaag

Zachte, huidvriendelijke bovenlaag.



pH Value

De kerntechnologie met aquisitielaag bestaande uit spiraalvormige vezels resulteert in een snelle opname en verdeling van het vocht, waarbij ammoniak veilig wordt ingesloten. Hierdoor wordt een lagere pH-waarde bereikt, dicht bij de normale pH waarde van de huid (pH 4,5).