


Attends® Contours Air Comfort



Attends - de oplossing voor iedere vorm van incontinentie

Attends Contours Air Comfort zijn uiterst zachte en anatomisch gevormde inleggers geschikt voor matig tot zware urine- en ontlasting incontinentie.

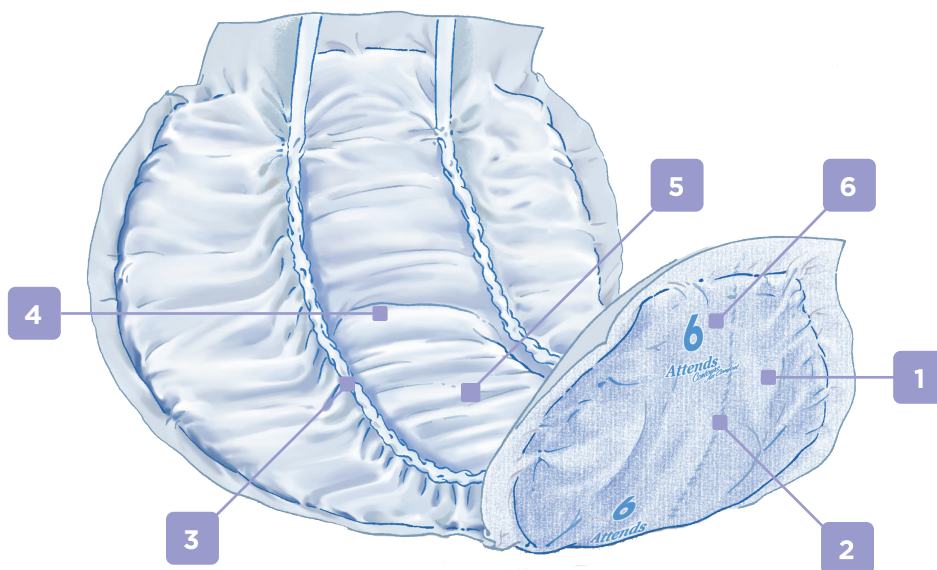

- 1 Een witte, ademende buitenlaag biedt extra zekerheid, discretie en het behoud van een gezonde huid.
- 2 Een vochtindicator geeft aan wanneer het product verschoond moet worden en is tevens behulpzaam om het product op de juiste manier aan te leggen.
- 3 Doorlopende anti-lekrandjes zodat vocht veilig wordt ingesloten (Contours Air Comfort 6 - 10).
- 4 Anatomisch gevormde kern voor een uitstekende en comfortabele aansluiting op het lichaam.
- 5 Een Superabsorberende kern zorgt voor maximale veiligheid tegen doorlekken, het behoud van een comfortabel droge huid en bescherming tegen nare geurtjes (Natuurlijke Geurbescherming).
- 6 Het absorptieniveau staat discreet vermeld op de fixatiestrook (Contours Air Comfort 4 en 5) en op de achterzijde (Contours Air Comfort 6 - 10) zodat deze eenvoudig kan worden herkend.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be

	Zakinhoud Doosinhoud	EAN 7332152 Zakken / Doos	Product lengte (cm) Product breedte in kruis (cm)	Materiaal onderlaag	Materiaal absorptiekern	Materiaal bovenlaag	Elastiek	Anti-lekrandjes	Fixatie tape	Natuurlijke Geurbescherming	Ademend	Quick-Dry Technologie
Attends Contours Air Comfort 4	42 5	203743 203750	39 16	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 5	42 5	205235 205242	50 21	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 6	35 4	203781 203798	58 17.5	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 7	28 4	203804 203811	58 17.5	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 8	28 4	203828 203835	64.5 19	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 9	28 4	203842 203859	70 19.5	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 10	21 4	205549 205556	78.5 25	Zacht non-woven met luchtdoorlatende eigenschappen	Dubbele kern met Vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven	✗	✓	✗	✓	✓	✓



Quick-Dry

Quick-Dry is de aquisitielaag en bevindt zich direct onder de zachte bovenlaag. Deze laag absorbeert de urine snel en zorgt ervoor dat het vocht niet meer in aanraking komt met de huid. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en wordt het risico op lekkage aanzienlijk verminderd. De vezels hebben de capaciteit meerdere scheuten urine met dezelfde efficiëntie te verwerken.



pH Waarde

De kerntechnologie met absorptielaag bestaande uit krulvormige vezels garandeert een lage pH waarde die gelijkwaardig is aan de pH waarde van de huid. Dit beschermt en draagt bij aan de huidgezondheid.



Ademend

Luchtdoorlatende buitenlaag. Deze voelt zacht en comfortabel aan en zorgt er ook voor dat de huid kan blijven ademen. Dit zorgt voor een goede conditie van de huid.



Natuurlijke Geurbescherming

De absorptiekorrels in de kern zetten vocht om in een gelachtige massa. Dit heeft een neutraliserende werking en vermindert de kans op onaangename geurtjes.



Attends Contours Air Comfort is getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be