


Attends® Slip Regular



Attends - de oplossing voor iedere vorm van incontinentie

Attends Slip Regular, het all-in-one product voor zware urine- en ontlastingsincontinentie

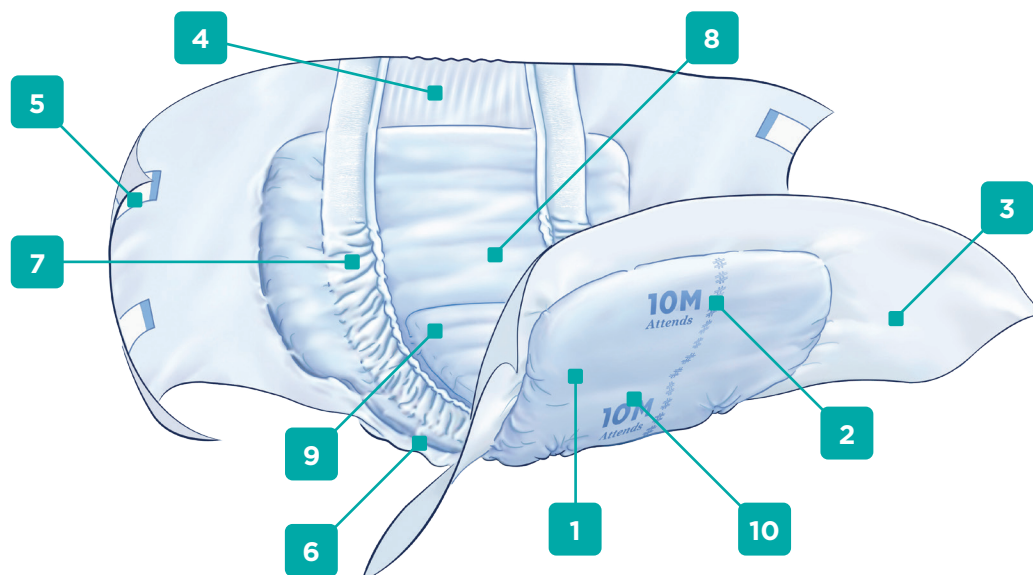

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Een witte, ademende buitenlaag biedt extra zekerheid, discretie en het behoud van een gezonde huid. (m.u.v. XL) | 2 Een vochtindicator geeft aan wanneer het product verschoond moet worden en helpt tevens het product op de juiste manier aan te leggen. | 3 Ademende katoenachtige heupbanden bieden extra comfort en het behoud van een gezonde huid. |
| 4 Rekbaar heupband voor een optimale pasvorm en verminderd risico op doorlekken. (m.u.v. XS) | 5 Hersluitbaar fixatiesysteem met 4 plakstrips zodat de slip perfect aansluit en goed blijft zitten. | 6 Goed aansluitende beenopening voor optimale pasvorm en extra veiligheid. |
| 7 Zachte opstaande anti-lek randjes verminderen het risico op doorlekken. | 8 Anatomisch gevormde absorptiekern voor een perfecte aansluiting op het lichaam. | 9 Een Superabsorberende dubbele kern zorgt voor maximale veiligheid tegen doorlekken, het behoud van een comfortabel droge huid en Natuurlijke Geurbescherming. |
| 10 De productmaat en absorptie-niveau staan discreet vermeld op de achterzijde zodat deze eenvoudig kan worden herkend. | | |

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl of www.attends.be

| | Zakinhoud Doosinhoud | EAN 732152 Zakken / Doos | Heup / Middelomvang (cm) | Materiaal buitenlaag | Materiaal absorptiekern | Materiaal bovenlaag | Rekbare heupband | Anti-lekrandjes | Hersluitbaar fixatiesysteem | Ademend | Natuurlijke Geurbescherming | Quick-Dry Technologie |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| Attends Slip Regular 8M | 28 4 | 203682 203699 | 80 - 110 | Ademende laag van katoenachtig materiaal | Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag | Non-woven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Slip Regular 8L | 28 4 | 203705 203712 | 100 - 150 | Ademende laag van katoenachtig materiaal | Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag | Non-woven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Slip Regular 9XS | 32 4 | 208182 208199 | 40 - 70 | Ademende laag van katoenachtig materiaal | Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag | Non-woven | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Slip Regular 9S | 21 4 | 208106 208113 | 50 - 85 | Ademende laag van katoenachtig materiaal | Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag | Non-woven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Slip Regular 9M | 28 4 | 203316 203323 | 80 - 110 | Ademende laag van katoenachtig materiaal | Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag | Non-woven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Slip Regular 9L | 28 4 | 203330 203347 | 100 - 150 | Ademende laag van katoenachtig materiaal | Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag | Non-woven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Slip Regular 10S | 21 4 | 208120 208137 | 50 - 85 | Ademende laag van katoenachtig materiaal | Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag | Non-woven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Slip Regular 10M | 26 4 | 207680 207697 | 80 - 110 | Ademende laag van katoenachtig materiaal | Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag | Non-woven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Slip Regular 10L | 26 2 | 207659 207666 | 100 - 150 | Ademende laag van katoenachtig materiaal | Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag | Non-woven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Slip Regular 10XL | 14 4 | 207635 207642 | 150 - 175 | Gelamineerde polypropyleen nonwoven en waterdichte polyethylene film | Dubbele kern met vezels, Superabsorberende Polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag | Non-woven | ✓ | ✓ | ✓ | Ja - heupband | ✓ | ✓ |



Quick-Dry

Quick-Dry is de aquisitielaag en bevindt zich direct onder de zachte bovenlaag. Deze laag absorbeert de urine snel en zorgt ervoor dat het vocht niet meer in aanraking komt met de huid. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en wordt het risico op lekkage aanzienlijk verminderd. De vezels hebben de capaciteit meerdere scheuten urine met dezelfde efficiëntie te verwerken.



pH Waarde

De kerntechnologie met absorptielaag bestaande uit krulvormige vezels garandeert een lage pH waarde die gelijkwaardig is aan de pH waarde van de huid. Dit beschermt en draagt bij aan de huidgezondheid.



Natuurlijke Geurbescherming

De absorptiekorrels in de kern zetten vocht om in een gelachtige massa. Dit heeft een neutraliserende werking en vermindert de kans op onaangename geurtjes.



Actieve Zone

De Actieve Zone bevindt zich in de kern van het product en garandeert een hoge absorptiecapaciteit daar waar het daadwerkelijk nodig is. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en zorgt voor extra veiligheid tegen doorlekken.



Ademend

Luchtdoorlatende buitenlaag. Deze voelt zacht en comfortabel aan en zorgt er ook voor dat de huid kan blijven ademen. Dit zorgt voor een goede conditie van de huid.



Attends Slips zijn getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek (m.u.v. XS en XL)