



UNITED

care

HOOG-LAAG BEDDEN HANDSOME

HANDSOME 1000, HANDSOME 2000 EN HANDSOME 3000.



HANDSOME BEDDEN

Bij alle diensten die wij leveren, staan wij punctueel achter onze eigen filosofie: 'Natuurlijk in beweging'.

Stabiliteit en veiligheid

De Handsome hooglaag-bedden zijn weergaloos solide, heeft een uniek design en is uitermate functioneel elektrisch verstelbaar. Door de keuze uit twee varianten hooglaag-systemen en een uitgebreid assortiment in de buitenzijde, brengt het bed bovenop de veiligheid en stabiliteit, een bijzonder mooi plaatje.

De Handsome bedden voldoen aan de Europese wet- en regelgeving en zijn CE gemarkeerd, klasse 1 aangemeld onder nummer NL-CA002-2018-43924. Daarnaast ook TÜV gekeurd volgens nummer: 2633401-02\2018. De fabrikant is ISO 13485 gecertificeerd.

Mobiliteit en zelfstandig

Met de Handsome bedden combineren wij twee essentiële eisen: we behouden de mobiliteit van de zorgvrager zo optimaal mogelijk én we verlagen de fysieke belasting van de zorgverlener. Zo blijven wij **natuurlijk** in beweging.



HANDSOME 1000

Samen genieten

De kracht van de Handsome 1000 schuilt natuurlijk achter de inhoud. Wat de buitenzijde belooft maakt de binnenzijde waar.

Comfort in alle opzichten

De Handsome 1000 lift u met een zeer sterke schaarconstructie zonder te wankelen omhoog. Het bed beschikt over een 38 cm tot 80 cm verstelling en is veilig en stabiel. De handschakelaar kan worden vergrendeld met een sleutel. Het ruggedeelte heeft een virtueel draaipunt dat schuifkrachten op de stuit voorkomt. De Handsome 1000 is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal en is daardoor duurzaam inzetbaar. De verstellingen hebben als doel de zelfredzaamheid van de zorgvragen te vergroten.

Uiterlijk

De keuze van de kleuren en vormen van het hoofd- en voetenbord hangt af van ieders persoonlijke smaak.





HANDSOME 2000

*Goede zorg en producten zijn
nauw met elkaar verbonden.*

HANDSOME 2000

Meegroeien in zorgvraag

De fraaie Handsome 2000 is een tijdloos "meegroeit bed". Zonder ingrijpende handelingen is het bed eenvoudig aan te passen aan de actuele zorgvraag.

De Handsome 2000 lift met een oersterke Y-schaarconstructie van 25 cm tot 80 cm hoog. Zelfs in deze hoogste stand blijft de enorme stabiliteit gewaarborgd. Met een eenvoudige bediening middels een handschakelaar zijn alle uitgebreide verstellingen mogelijk, waaronder de luxe comfortstand. Om de schuifkrachten op de stuit te voorkomen, heeft het ruggedeelte een virtueel draaipunt.

De Trendelenburgstand is met een sleutel te vergrendelen. Om de veiligheid van de zorgvrager zeker te stellen is de beremming van de Handsome 2000 centraal twee-om-twee geremd. De zorgverlener kan zo het bed ontgrendelen zonder een afstand te creëren met de zorgvrager.

Uiterlijk

De Handsome 2000 is uiterst fraai vormgegeven en door de luxe afwerking met wielkappen brengt dit tijdloze bed nog meer sfeer. De keuze van de kleuren en vormen van het hoofd- en voetenbord hangt af van ieders persoonlijke smaak.





ONRUSTHEKKEN

De Handsome bedden kunnen uitgevoerd worden:

1. zonder onrusthekken
2. met Sta-op beugel
3. met doorlopende onrusthekken
4. met gedeelde onrusthekken; verkrijgbaar in de volgende verdeling 1/2, 1/3 of 2/3.

De Handsome bedden kunnen aangepast worden naar de wensen van het moment. Als de zorgvraag geen onrusthekken vereist, hoeft het bed geen aanpassingen. Indien de zorgvraag zich wijzigt kunnen eenvoudig onrusthekken geplaatst worden.



Om te innoveren blijven
wij **natuurlijk** ook in beweging.



KLEUREN

Hoofd- en voetenbord

De Handsome 1000 en - 2000 zijn standaard leverbaar in de onderstaande vier kleuren. Op aanvraag zijn andere kleuren mogelijk.




COUNTRY
OAK



KIRSCHBAUM
ROMANA



BEECH

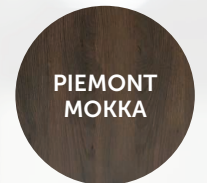

PIEMONT
MOKKA

HANDSOME 3000

De toekomst is nu

Wat ons oog aan een boxspring doet geloven, maakt de binnenzijde meer dan waar. Deze bijzonder Handsome 3000 bezit alle functies van een zorgbed en kan indien zorg aan het bed noodzakelijk is voorzien worden van alle opties, zelfs de onrusthekken.

In de tweepersoons uitvoering verloopt de hoog-laagverstelling synchroon, terwijl de andere verstellingen individueel in te stellen zijn.

Uitzonderlijke sfeer

De Handsome 3000 bezit het 2000 onderstel. Om het comfort te vergroten is het stalen frame optioneel ook verkrijgbaar met kunststof schotels. Bovenop de veiligheid en stabiliteit brengt deze Handsome 3000 een warm thuisgevoel. Er kan gekozen worden uit drie verschillende projectstoffen, ieders met een uitgebreide kleurcollectie en eigenschappen.



MAYA

JET

ULTRA



*Natuurlijk bewegen
verhoogt de kwaliteit van zorg.*



Modern en buitengewoon stabiel:

Wij sluiten ons aan bij veranderingen en trends in de zorg. Met onze Handsome hooglaag-bedden combineren we een huiselijk uitstraling met een oersterk hooglaag-systeem.

Samen genieten:

De kracht van de Handsome schuilt natuurlijk achter de inhoud. Wat de buitenzijde belooft maakt de binnenzijde waar.

Garantie:

Kwaliteit staat bij ons in een hoog vaandel. U krijgt 10 jaar garantie op het frame, met uitzondering van slijtage, en 3 jaar garantie op de motoren. De verwachte levensduur is ca. 10-15 jaar, afhankelijk van gebruik.

Voor u, de verzorger:

De verstelling van de Handsome 2000 en handsome 3000 geschiedt door een zeer sterke Y-schaarconstructie. Met een gebruiksvriendelijke bediening verstelt u het bed eenvoudig tot ieder gewenste verstelling; u kunt zelfs het bed in een luxe fauteuil veranderen. Het bed ondersteunt u bij het rechtop komen en vergemakkelijkt de transfer.

Voor u, de zorgverlener:

De Handsome 2000 en 3000 kan versteld worden van 25 cm tot 80 cm. Bij de 10-knops handschakelaar kan er behalve de Anti-Trendelenburg middels de sleutel ook de Trendelenburg ingeschakeld worden. Vanzelfsprekend zijn op dit veilige bed alle opties mogelijk. Mede door de eenvoudige bediening en de vele mogelijkheden verlengt het bed uw zorg.

Voor u, de zorgmanger:

De Handsome 2000 en 3000 is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal en is daardoor duurzaam inzetbaar. De verstellingen hebben als doel de zelfredzaamheid van de zorgvrager te vergroten. Daarnaast kan het bed gecombineerd worden met een smart-matras zodat de zorgverleners de grenzen van fysieke belasting niet hoeven te overschrijden. Uiteraard voldoet het bed aan alle Europese wet- en regelgeving. Met een uitgebreide keuze in de buitenzijde brengt de Handsome 2000 en 3000 sfeer in iedere vertrek.

MAAK UW SLAAPVERTREK COMPLEET

Om de Handsome bedden compleet te maken, kunt u kiezen uit drie verschillende nachtkastjes en een bijpassende kledingkast.

Nachtkast 1

Afmeting 48 x 48 x 65 cm. 4 wieltjes, diagonaal geremd.

Nachtkast 2

Afmeting 48 x 48 x 74 cm. 4 wieltjes, diagonaal geremd.

Nachtkast 3

Afmeting 53 x 46 x 87 cm. In hoogte verstelbaar uittrekblad. Aan 2 zijdes te gebruiken.

Kledingkast

Afmeting 100 x 200 x 60 cm. Locker voor waardevolle spullen.

De kast is afsluitbaar en indeling is bespreekbaar.

Kleuren




EIGENSCHAPPEN 90x200	HANDSOME 1000	HANDSOME 2000	HANDSOME 3000
Afmeting buitenmaat	103 x 207 cm	103 x 207 cm	95 x 205 cm
Afmeting binnenmaat/	90 x 200 cm	90 x 200 cm	90 x 200 cm
Extra breed	100x200 en 110x200	100x200 en 110x200	100x200 en 110x200
Hoogteverstelling	38-80 cm	25-80 cm , 27-82 cm bij 4 wielen geremd.	25-80 cm, 27-82 cm bij 4 wielen geremd.
Verstelling ruggedeelte	70°	70°	70°
Verstelling bovenbeengedeelte	30°	30°	30°
Verstelling onderbeengedeelte	22°	22°	22°
Anti-Trendelenburg	Niet aanwezig	14°	14°
Trendelenburg	Niet aanwezig	14° vergrendeld	14° vergrendeld
Tussenstop	Niet aanwezig	Aanwezig	Aanwezig
Beremming	Centraal twee-om-twee geremd	Centraal twee-om-twee geremd, 4 wielen geremd een optie.	Centraal twee-om-twee geremd, 4 wielen geremd een optie.
Wielen	100 mm	75 mm, 100 mm of 75 mm met wielkappen	75 mm, 100 mm of 75 mm met wielkappen
Ligvlak	4-delig metalen ligvlak	4-delig metalen ligvlak	4-delig metalen ligvlak
Maximale belasting bed	225 kg	225 kg	225 kg
Maximaal gebruikers gewicht	90x200: 175 kg 100x200 en 110x200: 225 kg	90x200: 175 kg 100x200 en 110x200: 225 kg	90x200: 175 kg 100x200 en 110x200: 225 kg
Nettogewicht bed	115 kg	125 kg	125 kg
Doorlopende onrusthekken	Ja, optioneel	Ja, optioneel	Ja, optioneel
Gedeelde onrusthekken	Ja, optioneel	Ja, optioneel	Ja, optioneel
Tilliftoegankelijk	Ja	Ja	Ja
Elektrische aansluiting	220-230 V	220-230 V	220-230 V
Smart proof	nee	Ja	Ja
Ligvlakverlenging (geïntegreerd)	10 cm aan hoofdeinde en voeteind	10 cm aan hoofdeinde en voeteind	10 cm aan hoofdeinde en voeteind

OPTIES

De Handsome bedden
kennen vele opties:

- Papegaaï met afrolbare riem
- Comfortschotels
- Bedlamp
- Wielkappen
- Stootwielen
- Onderbedverlichting
- Hockers
- Bedverlenging
- Ligvlakverlenging
- Onrusthekken
- Sta-op beugel

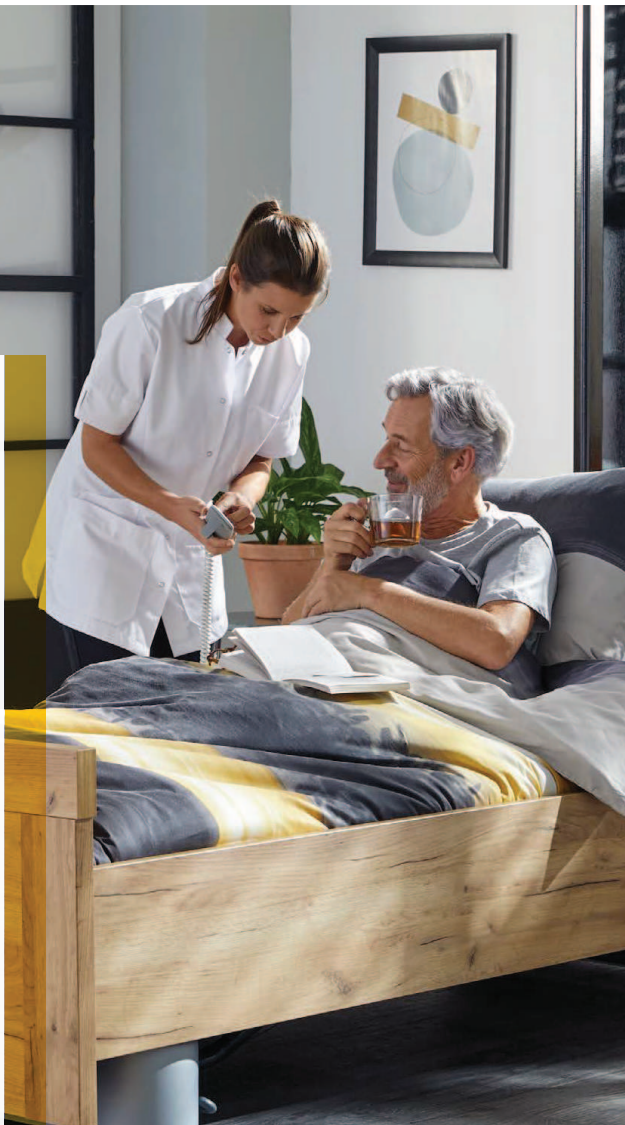

PAPEGAAI MET AFROLBARE
RIEM



WIELKAPPEN



HOCKERS



COMFORTSCHOTELS



STOOTWIELEN



ONRUSTHEKKEN



BEDLAMP



ONDERBEDVERLICHTING



STA-OP-BEUGEL



STEL UW BED SAMEN

STAP 1 KIES UW BED

Handsome 1000, Handsome 2000 of Handsome 3000 Centraal twee-om-twee geremd. Bij de Handsome 2000 en Handsome 3000 is centraal op 4 wielen geremd een optie.

STAP 2 KIES UW KLEUR

Bij de *Handsome 1000* en *Handsome 2000* kan er standaard gekozen worden uit 4 houtkleuren: Kirschbaum Romana, Beech, piemont mokka of Country Oak. Andere kleuren zijn op aanvraag. De *Handsome 3000* is verkrijgbaar in drie verschillende projectstoffen, ieders met een uitgebreide kleurcollectie.

STAP 3 KIES HET HOOFD - EN VOETENBORD

Voor de *Handsome 1000* en *2000* maakt u de keuze uit 3 verschillende modellen. dicht, open recht en open rond. Bij *Handsome 3000* zit standaard een hoofd- en voetenbord.

STAP 4 KIES VOOR EEN ONRUSTHEK

De keuze bestaat uit doorlopende - of gedeelde onrusthekken. Deze laatste kunnen in een 1/2, in 1/3 of in 2/3 verdeling over de lange zijde.

STAP 5 KIES UIT VERSCHILLENDE OPTIES

Papegaai met afrolbare riem, comfortschotels, bedlamp, wielkappen, stootwielen, hockers, sta-op beugel, onderbedverlichting, bedverlenging, ligvlakverlenging (afbeeldingen op voorgaande pag.).



UNITED
care



United Care Products b.v
Bremenweg 5 | 9723 TC Groningen | +31 (0)50-3050900
info@unitedcare.nl | www.unitedcare.nl

IN SAMENWERKING
MET **DERON**

Versie 1.3